




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Bruseleje 3000, fastmonteret R8528021
Farve	VVS: 777540484 NRF: 7501904 EAN: 5708590275475 HMI: 46570 NBS: N13:40,375 FDA: INT/D124320 Blygrå
Produktbeskrivelse	 Pressalit tilbyder et bredt program af mobile, fleksible, højdejusterbare og vægmonterede bruse- og skiftelejer i høj kvalitet. De er designet til at yde en stabil platform for omklædning, vask og pleje af voksne og børn. Lejerne kan anvendes i både skoler, institutioner, hospitaler og i private hjem, de har alle holdbare og slidstærke overflader som er både komfortable og meget rengøringsvenlige. Design og fleksibilitet sikrer optimale arbejdsbetingelser for hjælperen samt et højt komfort- og sikkerhedsniveau for brugeren. SCT 3000 serien har et stilfuldt og prisbelønnet design med fokus på komfort og brugervenlighed. Bruseleje 3000, fastmonteret. Opklappelig. Inkl. sengehest og vandopsamlingsbakke med integreret afløb. Liggeflade 1800 mm. Udvendige mål: 1005 mm x 1910 mm. Materialer: Pulverlakeret stål, aluminium, PUR-skum og polystyren. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.
Justerbarhed	Fastmonteret
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 200 kg. Når briksen belastes med 200 kg, belastes hver monteringsbolt med 60 kg
Materialer	Aluminium, porskum, kunststof og lakeret stål.

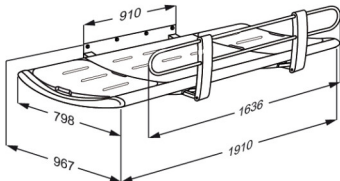

Produkt	Bruseleje 3000, fastmonteret
Varenummer	R8528021
Ergonomi	• De ergonomisk designede sengeheste har en praktisk sænket midterdel, som giver bedre adgang og arbejdsmiljø for plejeren både ved forflytning, badning, tørring, skiftning og påklædning af brugeren. • Énhånds betjente sengeheste gør det muligt for plejeren at opretholde øjenkontakt såvel som fysisk kontakt med brugeren under hele processen. • Let at rengøre, med glatte kontaktflader der ikke samler snavs og bakterier.
Funktioner	• Vandopsamlingsbakke med integreret afløb forhindrer oversprøjtning af personale og gulv. Slangen fra det centralt placerede afløb i vandopsamlingsbakken føres til afløb i gulv eller væg. • Lejets svagt buede form medvirker til optimal liggekomfort og sikkerhed. • Indstillelig nakkestøtte, der kan placeres i begge ender. • Den integrerede gascylinder gør det let at slå lejet op, så det kun optager minimal plads, når det ikke er i brug.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. BEMÆRK Hvis produktet placeres i salt- eller klorholdige omgivelser, reduceres garantien fra de normale 3 år til 1 år. Salt og klor kan have en ætsende virkning på produktets komponenter og vil nedsætte produktets forventede levetid.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: WipeClean Ethanol Disinfection 80% Wetwipe Ethanol Disinfection 70% Accel PREvention Wipes Lingettes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Wetwipe Universal Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	Bruseleje 3000, fastmonteret
Varenummer	R8528021

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®