




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, manuelt højde- og sideværts regulérbart R7450112000
Farve	VVS: 777536600 NRF: 6311189 EAN: 5708590312590 HMI: 71794 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 195 mm samt sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke). PLUS brusesæde 450, med ryg- og armlæn. Manuelt højderegulérbart 195 mm samt sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Armlæn kan højdereguleres uafhængig af sæde og ryglæn. Sæde og armlæn er opklappelige. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Armlænenes gribeblader i termoplastisk elastomér er slidstærke og rengøringsvenlige. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar 175 mm Maksimal brugervægt (sæde): 200 kg. Maksimal belastning for armlæn er 55 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringskrue med 23 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>

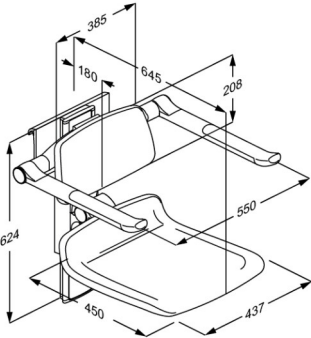

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, manuelt højde- og sideværts regulérbart R7450112000
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com