




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT toiletløfter, manuel højderegulérbar med håndsving, til gulvafløb R8115000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Udgået pr. 15/5-2017 og erstattet af R8112. Væghængt toilet 540 mm kan bestilles separat med varenr. R2091. Toiletløfter, manuel, 300 mm højderegulérbar med håndsvingsbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L, væghængt toilet (skållængde 540 mm) og R37 hvidt Dania toiletsæde med institutionsbeslag D92. De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter. Til gulvafløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Inkl. monteringsbolte til massiv mur. Udgået pr. 15/5-2017 og erstattet af R8112. Væghængt toilet 540 mm kan bestilles separat med varenr. R2091.. Toiletløfter, manuel, 300 mm højderegulérbar med håndsvingsbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L, væghængt toilet (skållængde 540 mm) og R37 hvidt Dania toiletsæde med institutionsbeslag D92. De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter. Til gulvafløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Inkl. monteringsbolte til massiv mur.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 200 kg
Materialer	Toiletløfteren er hovedsagelig fremstillet af anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren (PS).
Ergonomi	Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Et minimalt antal riller, slidser og huller gør rengøringen hurtig og effektiv og giver samtidig et smukt og eksklusivt design.

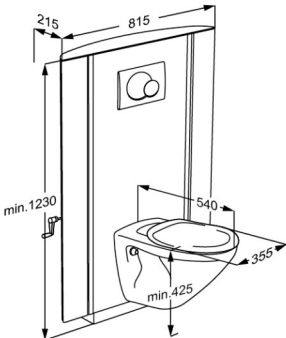

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	SELECT toiletløfter, manuel højderegulérbar med håndsving, til gulvafløb R8115000
Funktioner	Toilettet hæves og sænkes med håndsvinget. Håndsvinget kan placeres på begge sider af løfteren – helt uden brug af værktøj. Det er muligt at højdejustere toiletløfteren ved hjælp af boremaskine som alternativ til håndsvinget. Toilettet kan højdejusteres 300 mm fra 425 til 725 mm, så højden altid kan tilpasses perfekt til mobilitetshjælpemidler som f.eks. kørestol.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com