




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS toiletstøtte, 700 mm, opklappelig. R3871000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590346991  PLUS toiletstøtte, 700 mm, opklappelig, inkl. betjeningspanel til højderegulering af toiletløfter. Ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Monteres til højre (venstrehåndsbetjent). Højderegulerbar 150 mm uden brug af værktøj. Til eftermontering på toiletløfter (monteringsprofil medfølger). PLUS toiletstøtte, 700 mm, inkl. betjeningspanel til højderegulering af toiletløfter. Monteres til højre for bruger (venstrehåndsbetjent for hjælper). Højderegulerbar 150 mm uden brug af værktøj. Opklappelig. Ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på toiletløfter (monteringsprofil medfølger).
Justerbarhed	Højderegulerbar
Reguleringshøjde	150 mm
Produktkapacitet	Maksimal belastning: 150 kg.
Materialer	Toiletstøtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne er beklædt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter en glasforstærket nylonkerne. Overgangen mellem toiletstøtten og drejeleddet er dækket af en kappe af termoplastisk elastomér. Indvendige komponenter og befæstigelse er hovedsagelig fremstillet af rustfrit stål. Drejeleddet er forsynet med endepropper i ABS.
Strømforsyning (V)	230

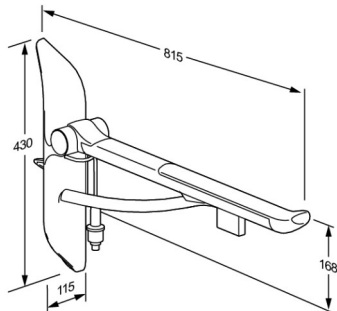

PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, 700 mm, opklappelig.
Varenummer	R3871000
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, 700 mm, opklappelig.
Varenummer	R3871000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®